



BASCULACIÓN

El sistema de basculación combinado del asiento mantiene al paciente suspendido en "gravedad cero" evitando presiones en zona lumbar, asiento y reposa-piernas.



Cojín reposacabezas ajustable en altura, acolchado, extraíble, para un máximo confort.



Apoyabrazos realizados en PUR y regulables en altura en cinco posiciones diferentes mediante un pulsador integrado.



Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.



Accesible para grúa por la parte delantera y para mesas camareras.



MODELO 4FC

4 ruedas de Ø100-125 con freno centralizado y bandeja reposapiés



MODELO 2R

2 ruedas traseras Ø 50 + freno



MODELO 4R

3 ruedas con freno independiente y rueda direccional Ø100

Sillones de paciente y acompañante

Flow

Dimensiones:	
Con 2 ruedas	1225 (alto) x 720 (ancho) x 810 (fondo) mm
Con cuatro ruedas	1225 (alto) x 720 (ancho) x 860 (fondo) mm
Dimensiones extendido	1650 mm
Dimensiones respaldo	840 (alto) x 510 (ancho)mm
Dimensiones asiento	520 (ancho) x 520 (fondo) x 460 (alto) mm
Dimensiones reposapiernas	510 (ancho) x 340 (fondo) mm
Angulación respaldo	85° a 168°
Reposapiés extensible	290-350 (ancho) x 220 (fondo) mm
Dimensiones apoyabrazos PUR	70 (ancho) x 490 (fondo) mm
Carga máxima	Hasta 180 kg
Peso aproximado sin accesorios	45 kg.

Flow Hi Low

Dimensiones	1410 (alto) x 735 (ancho) x 800 (fondo) mm
Largo extendido	168 cm
Dimensiones respaldo	840 (alto) x 510 (ancho)mm
Dimensiones asiento	510 (ancho) x 540 (fondo) x 540 -795 (alto) mm
Dimensiones reposapiernas	510 (ancho) x 340 (fondo) mm
Regulación de altura	540-795 mm
Angulación respaldo	85° a 168°
Reposapiés extensible	290-350 (ancho) x 220 (fondo) mm
Dimensiones apoyabrazos PUR	70 (ancho) x 490 (fondo) mm
Carga máxima	Hasta 180 kg
Peso aproximado sin accesorios	45 kg.



www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01



Flow Flow Hi Low

Sillones de paciente y acompañante

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.



Flow

Flow Hi Low

TAPIZADO

Tela vinílica auto-extinguible (según norma M2. EN1021.1-2) antibacteriana y resistente a la absorción y manchas). De fácil limpieza de y mantenimiento. Acolchado del sillón está realizado en espuma de poliuretano de alta densidad, pensados para el óptimo confort y adecuación ergonómica.



*Amplia gama de colores.

RESPALDO

Anatómico de talla alta, con acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad, inyectada, de 25HR, moldeada en frío, pensados para el óptimo confort y adecuación ergonómica.



ERGONOMÍA

Asa de traslado de paciente, ergonómico, realizado en tubo de acero con recubrimiento epoxy.



COMFORT

Asiento inclinado hacia el respaldo para evitar desplazamiento del paciente hacia delante.

La parte delantera del asiento, redondeada, estimula la circulación de la sangre.



REGULACIÓN EN ALTURA

Mediante sistema hidráulico accionando el pedal bilateral.



BASCULACIÓN

El sistema de basculación combinado del asiento mantiene al paciente suspendido en "gravedad cero" evitando presiones en zona lumbar, asiento y reposa-piernas.



ACCESORIOS OPCIONALES



Portasuero



Bandeja auxiliar



BANDEJA REPOSAPIES

FRENO CENTRALIZADO


ARTICULACIÓN

Movimiento independiente para la articulación del respaldo y reposapiernas, accionado mediante resorte a gas con sistema "Bloc-o-Lift". Permite su accionamiento en múltiples posiciones y clavado en cualquier posición intermedia para garantizar una mejora del descanso del y confort de paciente.



RUEDAS

El sillón FLOW HI-LOW está equipado con cuatro ruedas de Ø 125 mm de doble banda, tres ruedas con freno y una direccional. Su construcción en ABS es blindada y anti pelusa.

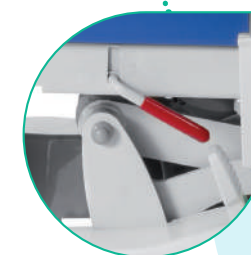

ARTICULACIÓN

Movimiento sincronizado del respaldo y reposapiernas accionado mediante resorte a gas.

